


Temperiermäntel für Laborflaschen und Bechergläser

Die richtige Temperierung von Proben nimmt im Laboralltag einen wichtigen Platz ein. Neben dem Erreichen einer bestimmten Temperatur, ist vor allem auch das Halten dieser Temperatur wichtig.

Mit unseren Temperiermänteln kann diese Aufgabe zuverlässig bewältigt werden. Neben der Grundausführung, sind auch Varianten mit zusätzlicher Isolierung und mit Boden im Konfigurationsprinzip erhältlich.

Um die externe Temperierung zu gewährleisten, sind die Temperiermäntel mit zwei 12 mm Anschlussoliven ausgestattet.

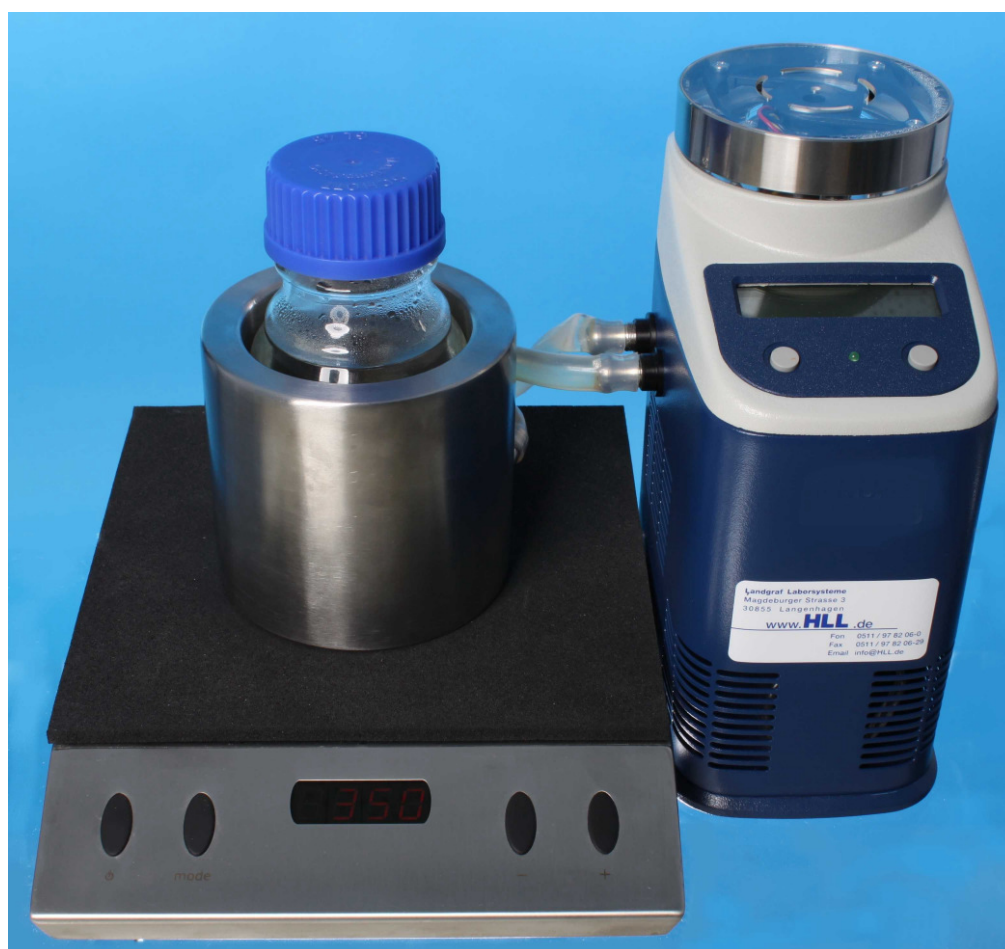

Aufbau: Temperiermantel ohne Boden mit Magnetrührer und Peltierthermostat


Eigenschaften:

- Kontrollierte Temperierung von Reaktionen
- Leichter Austausch der Reaktionsgefäße
- 12 mm Olivenanschlüsse für externe Thermostate
- Einsatz von Magnetrührern (Ausführung ohne Boden)

Optionen:

- Isolierung gegen Kondensation und Wärmeabstrahlung (empfohlen für Temperaturen kleiner 15 °C und größer 50 °C)
- Doppelwandiger Boden

Temperiermantel-SON05000-Schematische -Darstellung

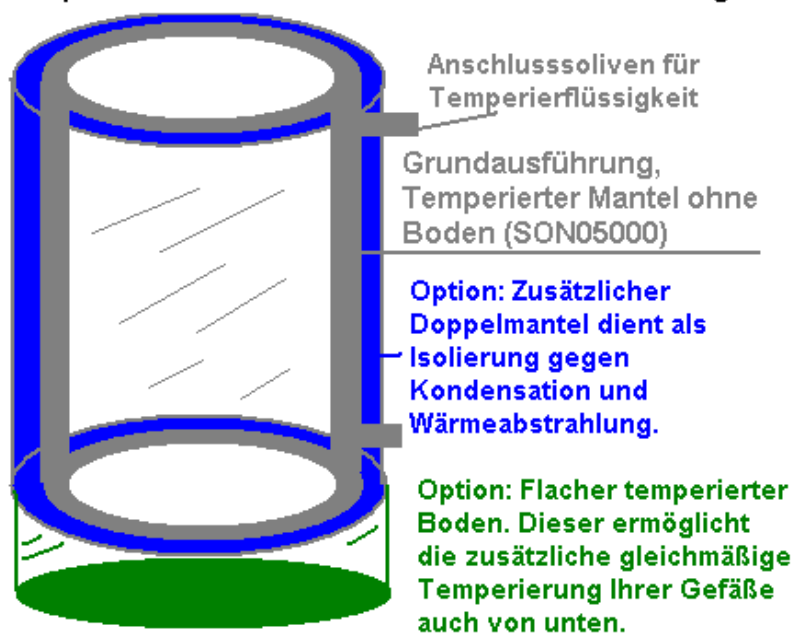

Bestellübersicht: Temperiermäntel für Laborflaschen GL 45				
Temperiermäntel	Volumen ml	Innendurchmesser / Höhe (mm)	Option: Isolierung	Option: Boden
SON0500011	100	57 / 48	SON05000I1	SON05000B1
SON0500012	250	71 / 71		
SON0500014	500	87 / 92	SON05000I2	SON05000B2
SON0500015	1000	103 / 143		
SON0500016	2000	138 / 152	SON05000I3	SON05000B3
SON0500017	3500	162 / xxx		
SON0500018	5000	184 / xxx	SON05000I4	SON05000B4

Bestellübersicht: Temperiermäntel für Bechergläser (h.F.)				
Temperiermäntel	Volumen Becherglas	Innendurchmesser / Höhe (mm)	Option: Isolierung	Option: Boden
SON0500020	50	39 / 50	SON05000I1	SON05000B1
SON0500021	150	55 / 65		
SON0500022	250	61 / 70		
SON0500023	400	71 / xxx		
SON0500024	600	81 / 115	SON05000I2	SON05000B2
SON0500025	800	91 / 127		
SON0500026	1000	97 / 140		

Erhältliches Zubehör:

- Laborflasche oder Becherglas
- Magnetrührer
- Magnetrührstäbchen
- externe Temperiereinheit
- Verteiler aus Edelstahl
- Schläuche

Sonderanfertigungen mit Ihren Wunschmaßen sind auf Anfrage möglich.