


## MBT Indikator-Klebebänder, IDL MBT Adhesive Indicator Tapes

Zur Kontrolle von Sterilisationsprozessen. Sichere und eindeutige Kennzeichnung des Sterilisationsgutes.



- | Artikel  | Best.-Nr.          |
|--|--------------------|
| ① <b>Steriklav-Indikatorband 1 Rolle à 55 m, 18 mm breit</b>   | <b>29 78 55191</b> |
| Der Indikator des Bandes schlägt von hellbeige auf dunkelbraun bei der Dampfsterilisation im Autoklaven um. Er reagiert gleichzeitig auf das Einwirken von Druck und Temperatur nach einer Mindestzeit. Bei 120°C nach 20 Minuten und bei 135°C nach 7 Minuten.<br>Anwendung: Empfindliches Sterilisationsgut im Dampfsterilisator wie Nährlösungen und ähnliches. |                    |
| Artikel  | Best.-Nr.          |
| ② <b>Heißluft-Indikatorband 1 Rolle à 55 m, 18 mm breit</b>  | <b>29 78 55192</b> |
| Der Indikator des Bandes schlägt von hellgrün nach braun bei der Heißluftsterilisation um. Er reagiert gleichzeitig auf Temperatur und Zeit. Bei 160°C nach einer Stunde und bei 180°C nach 30 Minuten.<br>Anwendung: Unempfindliche Geräte und Hilfsmittel.   |                    |
| Artikel  | Best.-Nr.          |
| ③ <b>Hand-Abroller für Indikatorband</b>   | <b>29 78 55193</b> |
| Standfest, sicheres Abrollen und Abtrennen des Indikatorbandes   |                    |

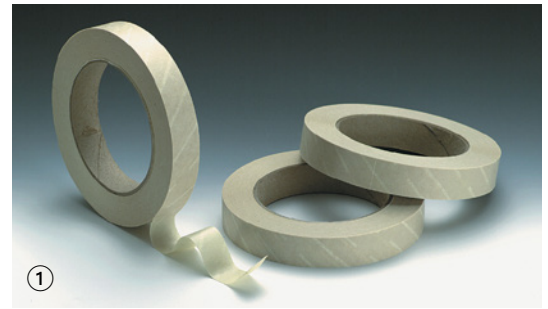